



SYNCHRO

TRATTAMENTO PER
LE ARTICOLAZIONI

A BASE DI
ACIDO IALURONICO



PHITOGEN

BEAUTY LABS

Distribuito da:
GoWell srl

Acido ialuronico sulle articolazioni

Le cellule della cartilagine rispondono esclusivamente allo stimolo della pressione idrostatica, ciò vuol dire che la disidratazione della matrice cartilaginea e tendinea, che rappresenta il fondamento patologico di queste malattie, può essere riparata esclusivamente dall'acido ialuronico, che è l'unico mezzo iniettivo capace di trasportare acqua in tali strutture. In assenza di questo fondamentale elemento, le cellule cartilaginee infatti perdono la loro capacità di riattivarsi e di riparare, con conseguente degenerazione del tessuto cartilagineo (i condrociti sono in grado di decodificare solo lo stimolo della pressione idrostatica e non di quella meccanica).

L'acido ialuronico, grazie alla sua componente principale costituita da acido glucuronico e glucosamina, è inoltre in grado di riportare alla normalità le condizioni chimico-fisiche articolari, ripristinando un quadro anatomico funzionale e fisiologico bilanciato.



Protocollo applicativo per la prevenzione e il trattamento di patologie degenerative e/o traumatiche cartilaginee

Il protocollo è raccomandato in base al dolore, alla prevenzione e alla necessità di riparare il tessuto cartilagineo nelle patologie condrali causate da traumi o/e fenomeni degenerativi.



GINOCCHIO




ANCA



SPALLA



CAVIGLIA

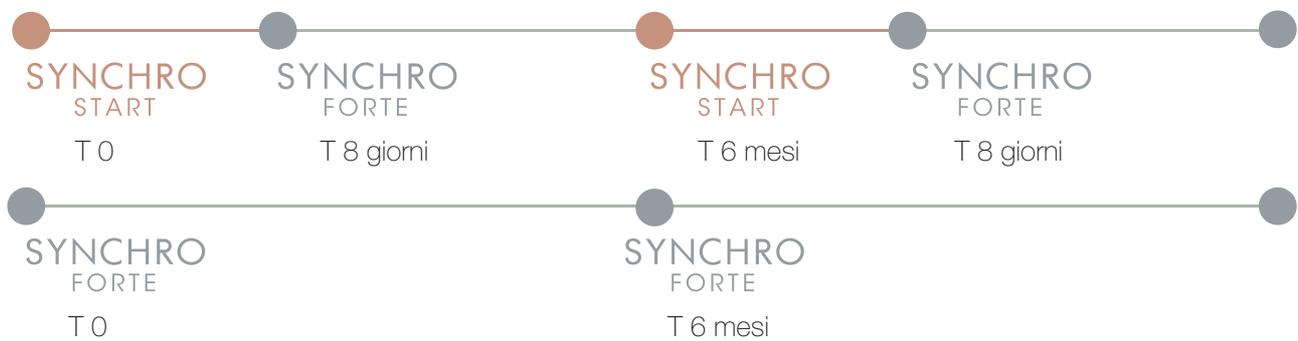

CURA E PREVENZIONE PICCOLE ARTICOLAZIONI

SI RACCOMANDANO
3 CICLI IN UN ANNO



MANO



PIEDE



POLSO



Chi può effettuare il trattamento

I prodotti SYNCHRO vengono iniettati nell'articolazione per alleviare il dolore, ripristinare la lubrificazione naturale, recuperando il fisiologico funzionamento delle articolazioni e migliorando la qualità della vita.

Il trattamento può essere effettuato a cura di diversi specialisti:

ORTOPEDICI
REUMATOLOGI
FISIATRI
MEDICI SPORTIVI
GERIATRI
TERAPISTI DEL DOLORE

SYNCHRO START



COMPOSIZIONE

PRODOTTO A BASE DI ACIDO IALURONICO LINEARE CON UN PESO MOLECOLARE INFERIORE A 1200 KDALTON, AVENTE AZIONE VISCOINDUTTIVA PER STIMOLO DELL' ATTIVITÀ PRODUTTIVA-RIPARATIVA DELLE CELLULE SINOVIALI E CARTILAGINEE.

COME AGISCE

AUMENTANDO LA CONCENTRAZIONE DELL'ACIDO IALURONICO IL SYNCHRO START, A DIFFERENZA DEL BASIC, HA UN'AZIONE VISCOINDUTTIVA PIÙ LENTA MA CON EFFETTI DI MAGGIOR DURATA (MEDIAMENTE 20/25 GIORNI).



ADATTO A PATOLOGIE DEGENERATIVE
E/O POST TRAUMATICHE DOVE
SI OSSERVA UNA DIMINUZIONE
DELL'ACIDO IALURONICO.

CONSIGLI SULL'UTILIZZO

TRATTAMENTO ELETTIVO SULLE
ARTICOLAZIONI SOGGETTE A CARICO
E DI GRANDI DIMENSIONI:

**SPALLA,
ANCA,
GINOCCHIO,
CAVIGLIA,
GOMITO.**

IL PRODOTTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN
COMBINAZIONE CON IL CROSSLINKATO.
IL PROTOCOLLO PREVEDE
UNA PRIMA SOMMINISTRAZIONE DEL
SYNCHRO START E DOPO UNA SETTIMANA
UNA SECONDA SOMMINISTRAZIONE
DEL SYNCHRO FORTE. UN ULTERIORE
PROTOCOLLO PREVEDE UN TRATTAMENTO
SEQUENZIALE CON 3 SOMMINISTRAZIONI A
CADENZA SETTIMANALE DA RIPETERE
DOPO 6 MESI.

SCHEDA PRODOTTO



Indicazioni

SOSTITUISCE IL FLUIDO SINOVIALE, DESTINATO AL
RESTAURO DI PROPRIETÀ
FISIOLOGICHE E REOLOGICHE DI ARTICOLAZIONI
COMPROMESSE, IN CASO DI DOLORE
O MOBILITÀ RIDOTTA CAUSATA DA MALATTIE
DEGENERATIVE O POST-TRAUMATICHE



Caratteristiche

INIBIZIONE DELL'INTERLEUCHINA, RIDUZIONE
IMMEDIATA DEL DOLORE E DELL'INFIAMMAZIONE
RAPIDO RIPRISTINO DELLE FUNZIONI, EFFETTO
ANALGESICO INDIRETTO PER TROPISMO PER I
RECCETTORI DEL DOLORE CAPSULARE
ARTICOLARE, INIBIZIONE DELLA FOSFATASI ACIDE



Composizione

SOLUZIONE FISIOLGICA TAMPONATA DEL
SALE SODICO ACIDO IALURONICO



Dosaggio

2 ML



Peso Molecolare

800 KDALTON
1.200 KDALTON



Proprietà Terapeutiche

VISCOSUPPLEMENTAZIONE & VISCOINDUZIONE



Concentrazione HA

1.6%
32MG/2ML



Confezionamento

1 SIRINGA MONOUSO PRERIEMPITA



Agente cross-linking

NON CROSS-LINKATO


SYNCHRO FORTE



COME AGISCE

TRATTAMENTO VISCOINDUTTIVO E VISCO SUPPLETTIVO A LENTO RILASCIO, GRAZIE ALLA CAPACITÀ DI ESERCITARE SINERGICAMENTE UN'AZIONE DI INDUZIONE DEI PROCESSI RIPARATIVI DELLA CARTILAGINE E DI SVOLGERE ATTIVITA' ANTIATTRITO.

TECNOLOGIA INNOVATIVA

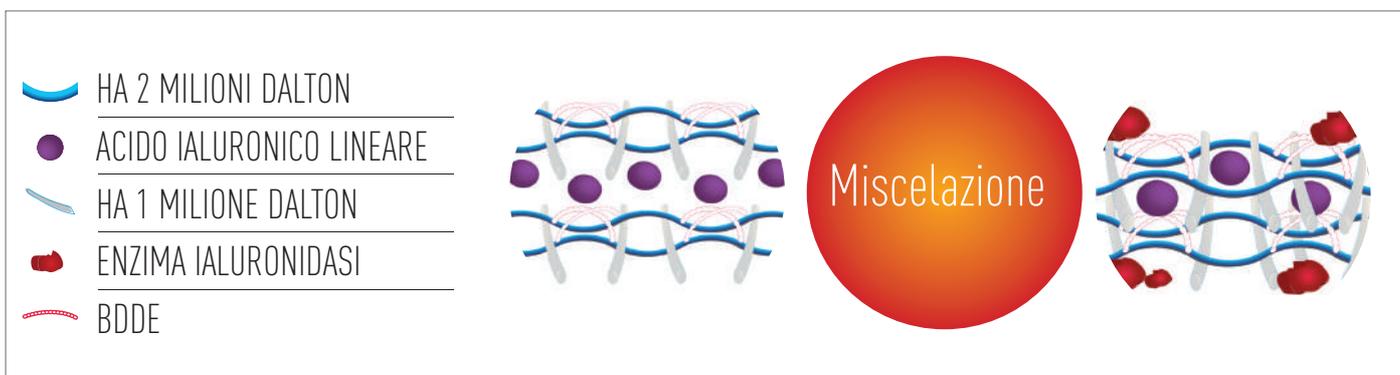

Un livello reticolato viene alternato a un livello lineare



FASE 1

L'HA intercalato è protetto contro la degradazione enzimatica e viene rilasciato lentamente

FASE 2

ACIDO IALURONICO MICROPARTICELLATO

Le immagini ottenute con la tecnica della microscopia elettronica a scansione (SEM) rivelano come i prodotti REGENFLEX BIOPLUS siano più compatti e omogenei rispetto ai filler, grazie alle minori dimensioni delle particelle di acido ialuronico reticolato. Le particelle più piccole permettono una migliore distribuzione del gel nella camera articolare, con una migliore ripartizione delle forze di compressione.

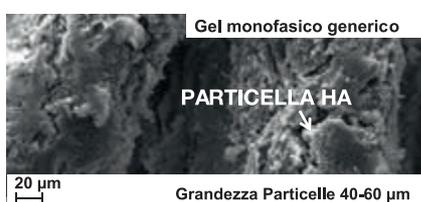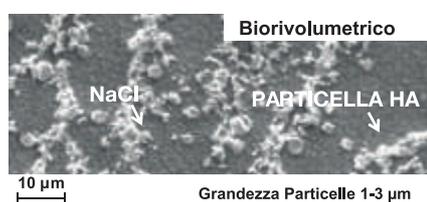



ADATTO A PATOLOGIE DEGENERATIVE
E/O POST TRAUMATICHE DOVE
SI OSSERVA UNA DIMINUZIONE
DELL'ACIDO IALURONICO.

CONSIGLI SULL'UTILIZZO

TRATTAMENTO ELETTIVO DELLE
ARTICOLAZIONI SOGGETTE A CARICO E DI
GRANDI DIMENSIONI: PREVENZIONE SU
TUTTE LE GRANDI ARTICOLAZIONI:

**SPALLA,
GOMITO,
ANCA,
GINOCCHIO,
CAVIGLIA.**

TRATTAMENTO DI PROFILASSI POST-
CHIRURGICA NELLA RICOSTRUZIONE DEL
LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE, E
NELLE LESIONI MENISCO- CARTILAGINEE.
IL PROTOCOLLO PREVEDE UN SINGOLO
TRATTAMENTO DA RIPETERE OGNI SEI
MESI.

SCHEDA PRODOTTO



Indicazioni

SOSTITUISCE IL FLUIDO SINOVIALE,
DESTINATO AL RESTAURO DI PROPRIETÀ
FISIOLOGICHE E REOLOGICHE DI ARTICOLAZIONI
COMPROMESSE, IN CASO DI DOLORE
O MOBILITÀ RIDOTTA CAUSATA DA MALATTIE
DEGENERATIVE O POST-TRAUMATICHE



Caratteristiche

È UNA SOLUZIONE FISIOLOGICA TAMPATA,
CONTENENTE IL 2,5% DI ACIDO IALURONICO
RETICOLATO INTERCATENATO CON SIGNIFICATIVE
PROPRIETÀ VISCOSE ED ELASTICHE. IL
SODIO IALURONATO È UNA COMPONENTE
FONDAMENTALE DEL FLUIDO SINOVIALE, ESSENDO
RESPONSABILE DELLE PARTICOLARI PROPRIETÀ
VISCOSE ED ELASTICHE.



Composizione

ACIDO IALURONICO CROSS-LINKATO



Dosaggio

3 ML



Peso Molecolare

CROSS-LINKATO HA 0.5+1+2M DALTON



Proprietà Terapeutiche

VISCOSUPPLEMENTAZIONE & VISCOINDUZIONE



Concentrazione HA

2.5%
75MG/3ML



Confezionamento

1 SIRINGA MONOUSO PRERIEMPITA




Agente cross-linking

BDDE

SYNCHRO

Phitogen Beauty Labs è un'impresa focalizzata da oltre vent'anni, nella produzione conto terzi & distribuzione di medical device a base di Acido ialuronico, impiegati in medicina estetica, ortopedia e dermocosmetica. L'azienda oggi rifornisce ed è partner di importanti marchi, nazionali e internazionali, leader nei rispettivi mercati di riferimento. Phitogen Beauty Labs dispone di un sito produttivo certificato di oltre 5.000 mq, dotato di clean room di ultima generazione, in grado di sostenere processi all'avanguardia per lo sviluppo di produzioni di alta gamma completamente Made in Italy.

Grazie all'esperienza acquisita nel tempo e ai costanti investimenti tecnologici, il gruppo oggi è in grado di offrire ai clienti business una completa assistenza, per l'implementazione di intere linee.

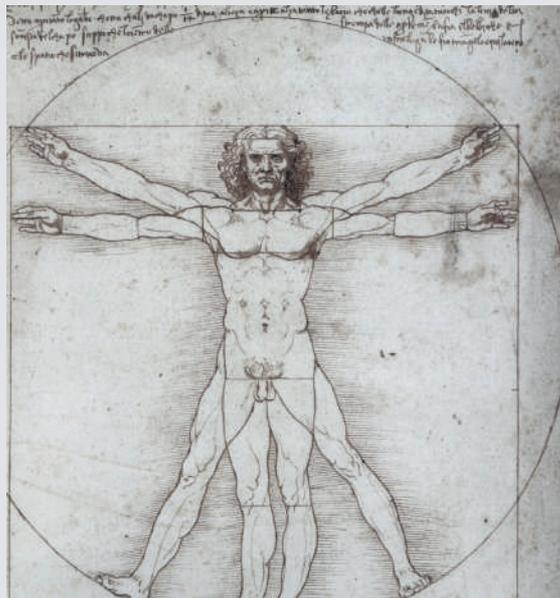

Distribuito da:

GOWELL Srl
Tel. 0549 908611
info@gowell.farm
www.gowell.farm